



ALS / 救急対応シミュレーター

CODE BLUE® III (成人) S300.100.215 (UNI®) S300.100.250 (OMNI®2)

自発呼吸

中枢性チアノーゼ

脈拍

心音・肺音



シンプルかつ、高い操作性。

- 内蔵バッテリーで最大4時間稼働
- モニタリングデバイスとのワイヤレス接続
(PC、タブレットから選べます)
- 移動用ケース付属



UNI®



OMNI®2

状態の表現

- 中心性チアノーゼ



- 心音、肺音



- 脈拍 (橈骨動脈、上腕頸動脈、大腿動脈)




- 自発呼吸
- 複数の呼吸パターン
- 録音された発声リスト

処置

- 臨床に近い電極・電気治療 (除細動、カルディオバージョン、経皮ペースング)



- 経口挿管、経鼻挿管

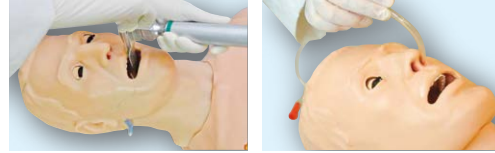

- 静脈路確保 (右腕)
- 骨髄路確保 (右足脛骨)
- 筋肉注射 (三角筋、大腿四頭筋) ※穿刺のみ
- ラリングマスク、コンビチューブの使用
- 片肺挿管、過換気による胃の膨満
- 頭部後屈、顎先挙上、下顎挙上

ソフトウェア シミュレーターを制御するソフトウェアを、UNI®もしくはOMNI®2から選べます。

〈機能対応表〉

UNI®
S300.100.215



OMNI®2
S300.100.250



〈機能対応表〉	UNI® S300.100.215	OMNI®2 S300.100.250
	PC型	タブレット型
インターフェイス		
操作端末	WindowsタブレットPC (Surface Pro ※2019年2月時点)	専用タブレット
パレット機能※1	○	○
CPRの効果測定	○	○
キュー機能※2	△	○
バーチャルモニター機能※3	○	×
バーチャルモニター (別売オプション)	別売オプション接続可能	別売オプション接続可能
プロファイル機能	○	×
シナリオ機能	○	×

OMNI®2の特徴

- シンプルでわかりやすい画面構成

例：CPR画面



- 機能を限定しているため、UNI®に比べて低価格

※1パレット機能…複数のバイタルサインの情報をまとめて保存できる機能

※2キュー機能…バイタルサインが指定した数値に達するまでの時間を設定できる機能 (OMNI®2では使用頻度の高いバイタルサイン (6種類) を同一画面上でコントロール可能)

※3バーチャルモニター機能…UNI®ソフトウェア上でバーチャルモニターを確認できる機能

Active Medical

総発売元：株式会社アクティブメディカル

〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日ビル 5F

TEL: 03-5842-3015 (代表) 03-6801-5419 (海外事業部ダイヤルイン)

FAX: 03-5805-2570

HP: <https://actvm.co.jp/> E-mail: medmail@actvm.co.jp

製造元：ガウマード・サイエンティフィック